


# Breezhaler 乾粉吸入劑

### ❖ 藥品名稱

- 昂舒吸入膠囊 Onbrez Breezhaler 150mcg
- 昂帝博吸入膠囊 Ultibro Breezhaler 110/50 mcg
- 吸補力吸入膠囊 Seebri Breezhaler 50 mcg

#### ❖ 外觀.

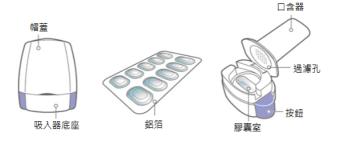

#### ❖ 操作方法

- 1. 打開吸入器 拔開帽蓋,握住吸入器底座,掰開口含器,打開吸入器。
- 2. **置入膠囊** 以乾燥的手將膠囊由鋁箔片中取出,放入膠囊室中。不可直接將膠囊放入口含器內。
- 3. 蓋上吸入器 将吸入器蓋上,聽到「喀」一聲表示已完全蓋好。
- 4. **刺破膠囊** 直立握住吸入器,同時按住兩邊按鈕,刺破膠囊。聽到「喀」一聲表示膠囊被刺破,即可放開按鈕。
- 呼氣 握住吸入器盡量呼氣。
  (不要將吸入器靠近嘴邊,以避免將氣吹入吸口)
- 6. **吸藥** 將口含器平行放入口中,緊閉雙唇含住口含器,快速穩定吸氣,且 應避免手指壓兩側按鈕。

《吸藥時可感覺到膠囊在膠囊室中旋轉,發出「呼呼」的聲音》

- 7. 閉氣 移開吸入器,儘可能閉氣 5-10 秒後再緩慢呼氣。
- 8. **檢查** 打開吸入器檢視膠囊中是否仍有粉末殘留。若膠囊中仍有粉末,則 關上口含器並重複步驟 5~7。
- 9. 丟棄空膠囊 確定藥粉吸完後,打開口含器,將吸入器傾斜倒出空膠囊丟棄。
- 10. **關上吸入器** 關上口含器,將吸入器以乾布或衛生紙擦拭後,並蓋上帽蓋。

## ❖ 注意事項

- 1. 應儲存於 30℃ 環境下。吸入器使用 30 天後,應丟棄。
- 2. 膠囊應存放於鋁箔中防潮,只在使用前才取出。膠囊為外用吸入,不可吞服。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊,如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。 天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話:(02)8512-8802



衛教短片