




胰島素筆型注射劑

❖ 藥品名稱

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ○ 蘭德仕注射劑 Lantus Solostar Inj | ○ 諾胰得諾特筆 Ryzodeg 70/30 |
| ○ 糖德仕注射劑 Toujeo Soln Inj | ○ 諾和密斯 30 諾易筆 NovoMix 30 |
| ○ 諾胰保諾特筆 Tresiba Inj | ○ 諾和瑞諾易筆 Novorapid Flexpen |
| ○ 爽胰達注射劑 Soliqua Inj | ○ 瑞和密爾諾易筆 Levemir Flexpen |
| ○ 優泌樂筆-混合型25
Mix25 Humalog Kwikpen | ○ 優泌樂筆-混合型50
Mix50 Humalog Kwikpen |

❖ 外觀

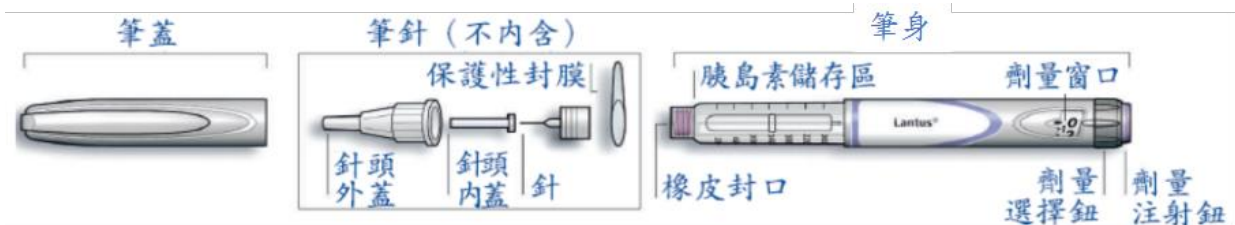

❖ 操作方法

1. 取下注射筆筆蓋，檢查筆身有效期限及藥物外觀有無異狀。
2. 以酒精棉片消毒筆式小管底端的橡皮塞。
3. 撕開針頭封條，垂直裝上針頭並鎖緊，將針頭內蓋移除。
4. 開封使用時，旋轉劑量選擇鈕至 2 單位劑量。針頭朝上，輕彈注射筆讓氣泡浮到頂端，將注射鈕按壓到底，排出注射液。 《非首次使用則省略此步驟》
5. 轉動劑量選擇鈕至需注射的劑量位置。
6. 將針頭垂直插入皮膚，注射鈕按壓到底直到刻度歸 0，並停留 10 秒後再拔出針頭。
7. 套上針頭外蓋，反方向轉下針頭，丟入醫療回收罐中。
8. 蓋回注射筆筆蓋。

❖ 注意事項

1. 第一次使用前，注射筆應先存放於室溫下 1-2 小時。使用期間請勿儲存在高於 25°C 的環境。開封後的注射筆不要放入冰箱。
2. 每次注射，應輪替注射部位。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802